

Ormco

symetri™  
CLEAR


Solide | Esthétique | Dépose facile





## Un bracket esthétique

Symetri Clear™ est un bracket esthétique à la solidité renforcée, conçu pour un confort patient optimal ainsi qu'une dépose simple et sûre, sans risque de fracture.

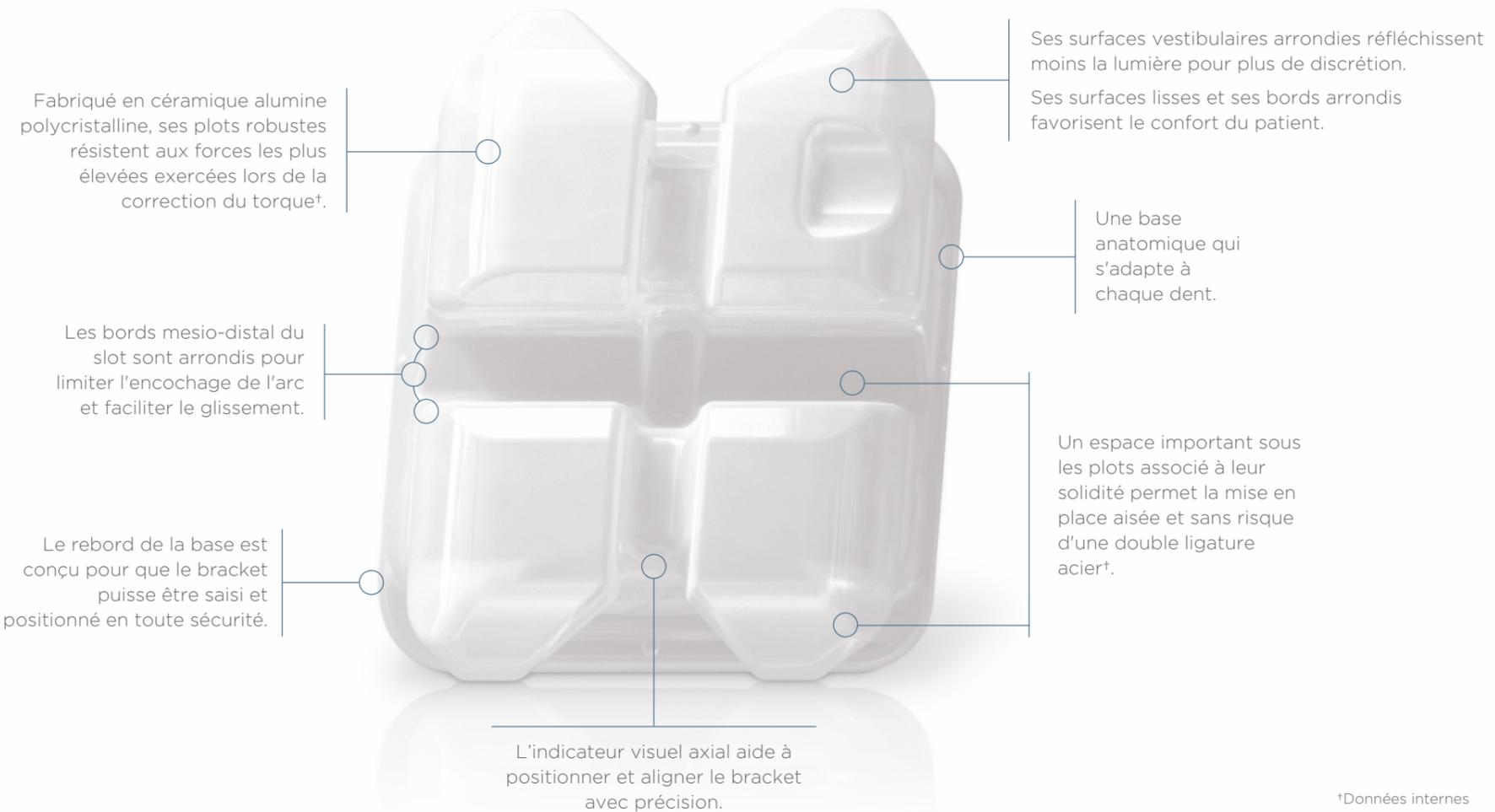

†Données internes

## Une dépose simplifiée

Grâce au design unique de la base du bracket, la dépose à l'aide de la pince brevetée Symetri Clear™ est simple et sûre, sans risque d'abîmer le bracket. Une force minimale suffit pour le décoller sans le briser.

La base traitée au laser est conçue pour que le bracket se détache de l'émail sans se fracturer tout en exerçant une force réduite††.




Une base anatomique qui s'adapte à chaque dent.

††Données internes

## Conçu pour les patients et les praticiens

Symetri Clear est un bracket esthétique conçu pour offrir un confort optimal au patient, tout en répondant à l'ensemble des exigences sur le plan clinique. Son profil réduit limite les interférences occlusales, permettant ainsi un collage aux 2 arcades.

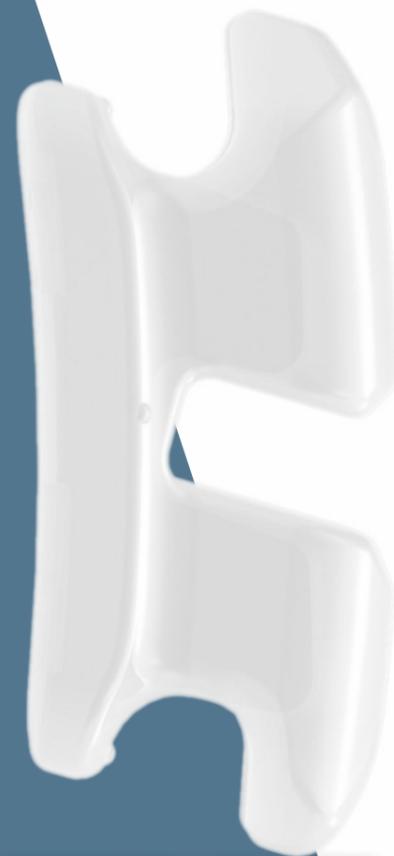


- La forme biseautée de la gorge facilite l'insertion de l'arc.
- Les bords arrondis de la gorge minimisent l'encochage de l'arc et facilitent son glissement.
- Ses contours arrondis et lisses assurent un confort optimal au patient.
- Le profil réduit limite les interférences occlusales.
- L'espace important sous les ailettes permet la mise en place d'une double ligature acier.



## Des dimensions in/out uniques et optimisées

En exclusivité chez Ormco, Symetri Clear est disponible en in/out standard ou slim pour les latérales supérieures. Cet in/out slim breveté a été conçu pour aligner les bords incisifs des centrales, des latérales et des canines, minimisant ainsi les plicatures et améliorant la finition.

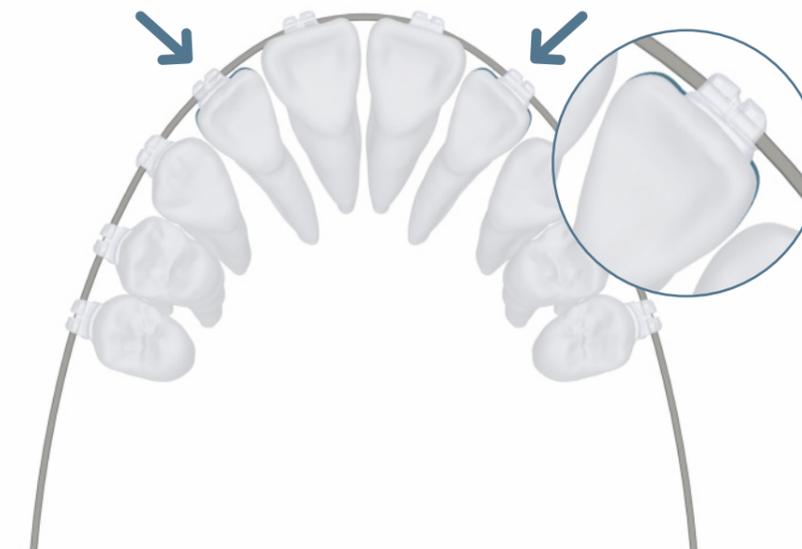

\* Ne suppose aucun engagement




dent	torque	ang	rot	type bracket	références			
<b>ARCADE MAXILLAIRE</b>					.018 G	.018 D	.022 G	.022 D
Centrale	+17°	4°	0°	twin	418-1111	418-1110	419-1111	419-1110
Latérale	+10°	8°	0°	twin	418-1211	418-1210	419-1211	419-1210
Latérale - Option in/out slim	+10°	8°	0°	twin	418-1213	418-1212	419-1213	419-1212
Canine	0°	8°	0°	twin	418-1311	418-1310	419-1311	419-1310
Canine - Crochet	0°	8°	0°	twin	418-2311	418-2310	419-2311	419-2310
Prémolaire	-7°	0°	0°	twin	418-1510		419-1510	
Prémolaire - Crochet	-7°	0°	0°	twin	418-2511	418-2510	419-2511	419-2510
<b>ARCADE MANDIBULAIRE</b>					.018 G	.018 D	.022 G	.022 D
Antérieure	-6°	0°	0°	twin	418-1010		419-1010	
Canine	0°	3°	2°	twin	418-1411	418-1410	419-1411	419-1410
Canine - Crochet	0°	3°	2°	twin	418-2411	418-2410	419-2411	419-2410
1ère prémolaire	-12°	0°	0°	twin	418-1610		419-1610	
1ère prémolaire - Crochet	-12°	2°	0°	twin	418-2611	418-2610	419-2611	419-2610
2ème prémolaire	-17°	0°	0°	twin	418-1710		419-1710	
2ème prémolaire - Crochet	-17°	2°	0°	twin	418-2711	418-2710	419-2711	419-2710

Kits individuels pour patient		.018	.022
Symetri Clear™ 5-5 Sup/Inf avec crochets sur 3-4-5	twin	746-2101	746-2201
Symetri Clear™ 3-3 Sup/Inf avec crochets sur 3	twin	746-2102	746-2202
Symetri Clear™ 3-3 Sup avec crochets sur 3	twin	746-2103	746-2203
Symetri Clear™ 5-5 Sup avec crochets sur 3	twin	746-2105	746-2205
Symetri Clear™ 5-5 Sup avec crochets sur 3-4-5	twin	746-2106	746-2206

Pince de dépose Symetri Clear™ 866-4025

Typodont Symetri Clear™ 717-0021

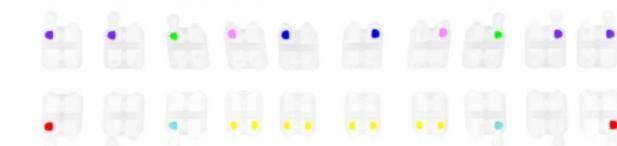

**symetri**  
CLEAR

Pour en savoir plus,  
contactez votre représentant  
Ormco au 00800 3032 3032  
ou rendez-vous sur [ormco.fr](http://ormco.fr)

**symetri**<sup>TM</sup>  
CLEAR

Contactez votre représentant Ormco **00800 3032 3032**  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur **ormco.fr**

Le bracket Symetri est un produit de santé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE0086 BSI - Classe II A. Fabriqué par Ormco. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice qui accompagne le dispositif médical ou sur l'étiquetage remis. Non-remboursé par les organismes d'assurance santé.

**Brackets biplots** | Digital | Auxiliaires | Développer son cabinet | Formation  
Auto-ligature | Aligneurs | Tubes/Bagues | Arcs | Produits de laboratoire

© 2019 Ormco Corporation

**Ormco**<sup>TM</sup>

ORMCO FRANCE SAS  
45-47, Bd Paul Vaillant Couturier  
94200 Ivry sur Seine - FRANCE  
ormco.fr

762-6650